


APESIN spray F

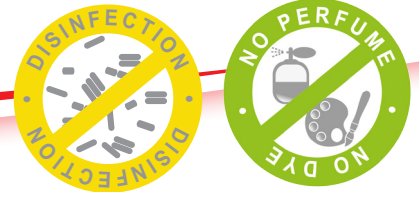

Vedel alkoholipõhine kiire desinfitseerimisvedelik, ei sisalda lõhnaaineid

- Kiire toimega
- Ei sisalda värv- ega lõhnaaineid

Toote profiil

- APESIN spray F on kiiretoimeline desinfitseerimisvahend bakterite ja pärmiseente vastu ning piiratud viirusiidse toimega.
- See sobib alkoholi taluvatele pindadele ja mööblile tervishoiuasutustes ning toiduainete valdkonnas.
- Otseselt toiduga kokkupuutuvad pinnad tuleb enne kasutamist joogiveega loputada.
- APESIN spray F ei sisalda kloori, aldehüüdi ega fenooli.

Kasutusala

- APESIN spray F saab kasutada ka madratsitel, vooditel, transpordikäruudel, instrumentide ladustamisvahenditel, vaipadel ja tualettruumi kandesõrestikel, prügikastidel, prill-laudadel, karkassidel, ukselehtedel, mööblil ja tööpindadel, käsipuudel, jalatsitel kui ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Sobib ka lõikurikarpide ja nõude puhastamiseks. Parim nugade, saabaste ja puhastusmasinate jaoks.
- Pihust APESIN spray F võib kanda alumiiniumpindadele.
- Ärge kasutage alkoholitundlikel materjalidel (näiteks pleksiklaasil).

Pealekandmise juhised

- Kasutada lahjendamata. Pihustada 20-30cm kauguselt esemetele, nii et pinnad on täiesti niisked, või pritsida puhtale niiskust imavale lapile ja pühkida kogu pind sellega üle.
- Max 50 ml/m². Mitte pihustada suurele pinnale (max 2 m²).
- Laske lahusel toimida. Täpsemat teavet ja toimeaegade andmeid leiate järgmisel leheküljel. Standardid ja toimespekter.

Koostis

Koostisosad 100 grammi kohta: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Jätkusuutlik areng ja tootmine



Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti. Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta.

Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.

Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täiesti tühja pakendi.

Kasutamine ja doseerimine



Järgige allolevaid juhiseid.



Kontsentreeritud

Desinfitseerimine: sobib spetsiifiliste hügieen nõuetega pindadele.



Kontsentreeritud

Pindade puhastamine: Pihustage puhtale lapile ja pühkige märjalt pind üle või ainult pihustage.



Kontsentreeritud

Pindade puhastamine: Pühkige pinda märja või niiske puhta lapiga.



Kontsentreeritud

Tualeti puhastamine: Puhastage tualettiistmeid.



Ideaalne köögipindade puhastamiseks.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 714867 10 x 750 ml

Teie usaldusväärne partner:



APESIN spray F

Vedel alkoholipõhine kiire desinfitseerimisvedelik, ei sisalda lõhnaaineid

| Pinna desinfitseerimine | | Toime aeg | | | |
|--|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Toiduvaldkond, tööstus ja asutused | | 30 sec. | 1 min. | 2 min. | 5 min. |
| bakteritsiidne | | | | | |
| EN 1276 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| EN 13697 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| Hävitab pärmseened | | | | | |
| EN 1650 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| EN 13697 | Madal orgaaniline koormus | | x | | |
| Pinna desinfitseerimine | | Toime aeg | | | |
| Meditsiiniline | | 30 sec. | 1 min. | 2 min. | 5 min. |
| bakteritsiidne | | | | | |
| EN 13727 | Kõrge orgaaniline koormus | x | | | |
| EN 13697 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| EN 16615 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| Tuberkuloosivastane | | | | | |
| EN 14348 | Kõrge orgaaniline koormus | x | | | |
| Hävitab pärmseened | | | | | |
| EN 13624 | Kõrge orgaaniline koormus | x | | | |
| EN 13697 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| EN 16615 | Kõrge orgaaniline koormus | | x | | |
| virustevastane | | | | | |
| EN 14476 piiratud virutsiidne toime ümbrisega viiruste vastu (vaktsiinia viirus). | Kõrge orgaaniline koormus | x | | | |
| EN 14476 (Vacciniavirus) | Kõrge orgaaniline koormus | x | | | |
| EN 14476 (MNV) | Kõrge orgaaniline koormus | | | x | |

