


APESIN spray F

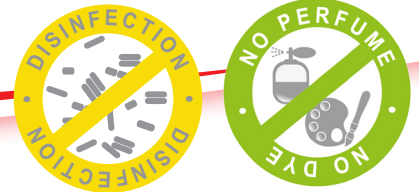

Alkoholbaserad snabbdesinfektion, flytande - parfymfri

- Snabbverkande
- Fri för farvestof og parfume.

Produktprofil

- APESIN spray F er et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel mod bakterier og gær samt med begrænset virusdræbende virkning.
- Den er læmplig for att alkoholbestandiga ytor och möbler i vårdlokaler och i livsmedelsutrymmen.
- Områden som kommer i direktkontakt med livsmedel måste sköljas av med dricksvatten före de används igen.
- APESIN spray F er fri for klor, aldehyd og fenol.

Användningsområde

- APESIN spray F kan även användas på madrasser, sängar, rullvagnar, instrumentbehållare, mattor och stommar i badrum, soptunnor, toaletter, dörrhandtag, möbler och arbetsytor, handräcken och skor samt ytor som är svåra att nå.
- Också lämplig for att rengöra kartongknivar och lådor. Den är bäst avsedd för knivar, stövlar och för att rengöra maskiner.
- APESIN spray F kan användas på aluminiumytor.
- Använd ej på ytor som är känsliga för alkohol (t.ex.: PLEXIGLAS®)

Appliceringsanvisning

- Används outspätt. Spraya föremålen direkt från ett avstånd på 20-30 cm så, att ytorna fuktas in fullständigt, eller spruta på en ren och absorberande trasa och torka av ytan fullständigt med den.
- Max. 50 ml/m². Spraya inte in större ytor (max. 2 m²).
- Låt medlet verka, för detaljerad information och exponeringstider, se nästa sida: Standarder och verknings-områden.

Ingredienser

Ingredienser per 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Hållbar utveckling och produktion



Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.

Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Användning och dosering



Följ instruktionerna nedan.



Koncentrerad

För desinfektion:
Lämplig för områden med särskilda hygienkrav.



Koncentrerad

Sprejapplicering:
Spreja på en ren trasa och gnid in på ytan eller spreja direkt.



Ytrensning:
våttorka ytan med en ren trasa.



Koncentrerad

Toalettrensning:
Rengöra toalettsäten.



Koncentrerad

Idealiskt för användning på ytor i köksutrymmen.



Försäljningsenheter:

Ordernr. 714867 10 x 750 ml

Din betrodda partner på plats:



APESIN spray F

Alkoholbaserad snabbdesinfektion, flytande - parfymfri

Ytdesinfektion		Exponeringstid			
Livsmedelsindustrin / Industri- och institutionella områden		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
baktericid					
EN 1276	Stora mängder organiska ämnen		x		
EN 13697	Stora mängder organiska ämnen		x		
Jästicida effekt					
EN 1650	Stora mängder organiska ämnen		x		
EN 13697	Små mängder organiska ämnen		x		
Ytdesinfektion		Exponeringstid			
Medicinskt område		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
baktericid					
EN 13727	Stora mängder organiska ämnen	x			
EN 13697	Stora mängder organiska ämnen		x		
EN 16615	Stora mängder organiska ämnen		x		
Tuberkeldræbende					
EN 14348	Stora mängder organiska ämnen	x			
Jästicida effekt					
EN 13624	Stora mängder organiska ämnen	x			
EN 13697	Stora mängder organiska ämnen		x		
EN 16615	Stora mängder organiska ämnen		x		
virucid					
EN 14476 effektiv mot utvecklade virus	Stora mängder organiska ämnen	x			
EN 14476 (Vacciniavirus)	Stora mängder organiska ämnen	x			
EN 14476 (MNV)	Stora mängder organiska ämnen			x	

